

## Tvättset Nonwoven 10 tork, skål 500ml



Ingående delar/material	Vikt	Färg
<b>Nonwoven:</b> 10 st tork, 60 mm i Ø Utvikt mått: 30 x 30 cm Viskos 70% Polyester 30%	30g/m <sup>2</sup>	Vit, utan optiskt blekmedel
<b>Elastisk ring:</b> Silikon		
<b>Skål:</b> 100% polypropylen med gradering 500 ml - bruksfärdig		Transparent

Produkten innehåller inte PVC.

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	medicinskt papper/plast	förbränning/mjukplast
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 1644-1 Provningsmetoder för kompresser av nonwoven-material för medicinskt bruk - Del 1: Nonwoven-material för tillverkning av kompresser

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9158173	1	32 x 1 = 32	2 x 32 = 64	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Skål för uppsamling och mätning av olika vätskor inom operationsverksamhet eller där motsvarande behov finns. Rundtork för preoperativ tvätt eller annat behov av rengöring i samband med procedur.

### Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut innehållet med sterila handskar.
2. Använd steril pincett eller annat instrument för att hantera torken som ligger lös i skålen.
3. Fyll kärlet med tillämplig vätska och tvätta eller förvara efter behov.
4. Material kasseras efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt


Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt

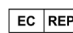


och ansluten till



 **Manufacturer:**  
Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

 **Importer:**  
AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

 **EC-REP:**  
Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium