


Stericlin® Containerfilter med indikator

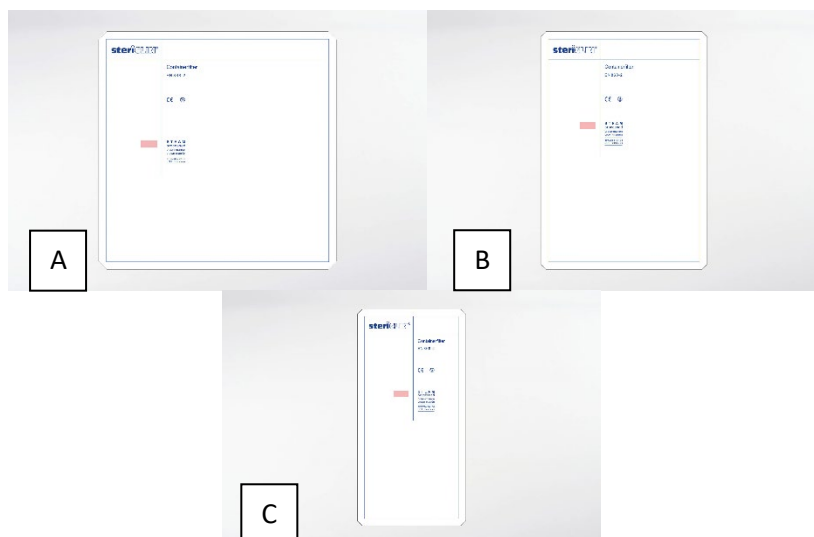

- För filtrering av container
- Med indikator för ånga (röd till brun)
- Märkt med artikel- och LOT nr.
- Avfasade hörn

Användningsområde:

Containerfilter är avsedda för engångsbruk i kombination med containersystem som används som sterilt barriärsystem för de medicinska produkter som skall steriliseras. Ändamålet är att möjliggöra sterilisering samt upprätthålla steriliteten inuti containern. Passande för Aesculap containers.

Bild	Art nr	Storlek	IFP st	TFP st
	3FCZB470101	Ø 190 mm	100	1000
A	3FCZB470102	230 x 230 mm	100	500
B	3FCZB470104	171 x 232 mm	100	1000
C	3FCZB470106	118 x 235 mm	100	1000

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

PRODUKTFAKTA

Material: Papper

Färg: Vit med tryck

CE-märkning: Klass I
MDR (EU) 2017/745

Standard: I enlighet med
EN ISO 11607. Indikator
ISO 11140-1 (typ I)

Reach: Produkten
innehåller inga ämnen som
tas upp i EU:s Reach
förordning eller dess ev.
tillägg

Tillverkningsland: Tyskland

Hållbarhetstid: 5 år från
tillverkningsdatum

Förvaringsinstruktioner:
Mellan 15°C och 25°C samt
relativ luftfuktighet mellan
35% och 50%. Förvaras
torrt! Skyddas från värme
och direkt solljus.

Förpackningar:
Inner fp: 100st lösa i
plastpåse, plastpåse
placerad i kartong.
Tfp: Kartong av TFC
material.

Avfallshantering: Sorteras
som hushållsavfall.

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se