


## Stericlin® MultiSeal Plombering för containers

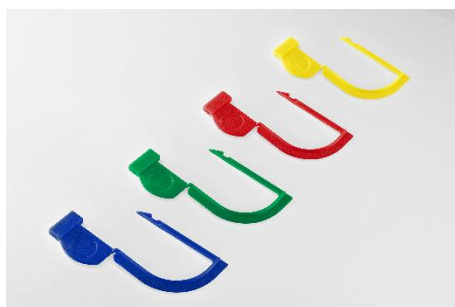

Indikator

Stericlin® plastplombering består av steriliseringsresistent polypropen och finns i olika färger. Alla vanliga containersystem med låsöglor kan förseglas säkert i enkla steg. Stericlin® MultiSeal passar för olika containers. Den speciella konstruktionen av alla versioner av Stericlin®-plombering, med en stor öppningsvinkel underlättar enkel montering av behållaren och låsning genom att hakas fast. Behållaren kan endast öppnas genom att bryta plomberingen. Detta säkerställer att den sterila containern inte har manipulerats vid ankomsten till användningsstället. Stericlin®-plombering öppnas genom att böja vid den tunna delen i plasten och vrida försiktigt på handtagsplattan. Stericlin®-plombering kan sedan brytas utan ansträngning.

Multiseal finns även med kemisk indikator för ånga. Indikatorn skiftar färg från rosa till brunt.

Art nr	Färg	Indikator	Tfp fp st
3FCZB460302	Blå		1000
3FCZB460303	Gul		1000
3FCZB460304	Röd		1000
3FCZB460306	Grön		1000
3FCZB460308	Vit		1000
3FCZB460310	Blå	x	1000
3FCZB460312	Röd	x	1000
3FCZB460313	Gul	x	1000
3FCZB460314	Grön	x	1000
3FCZB460316	Vit	x	1000

## PRODUKTFAKTA

**Material:** Polypropylen

**Färg:** Flera

Indikator i enlighet med EN ISO 11140-1 (typ I)

**Tillverkningsland:** Tyskland

**Hållbarhetstid:**

**med** indikator 4 år från tillverkningsdatum

**utan** indikator 5 år från tillverkningsdatum

**Förvaringsinstruktioner:**

**med** indikator mellan 15°C och 25°C samt relativ luftfuktighet mellan 40% och 50%. Förvaras torrt! Skyddas från värme och direkt solljus.

**utan** indikator förvaras torrt! Skyddas från värme och direkt solljus.

**Förpackningar:**

Inner fp: PE-påse

Tfp: Kartong av TFC material.

**Avfallshantering:** Sorteras som plast enligt lokala regler.

**Manufacturer:**

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH  
Industriestrasse 6  
D-91555 Feuchtwangen  
Germany  
www.stericlin.de

**Distributor:**

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
www.astmedical.se