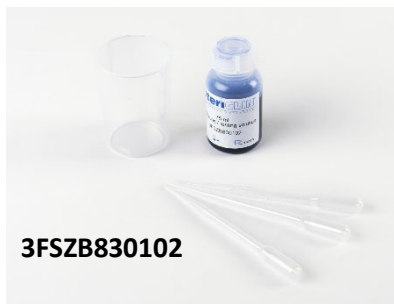
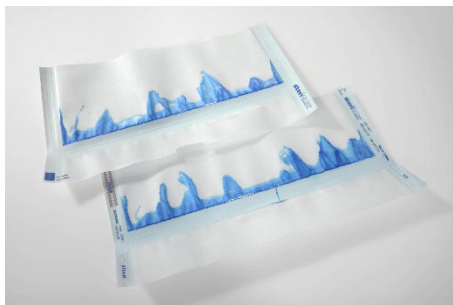


## Stericlin® Svetsfogskontroll

**3FSZB830102****3FSZB830103**

### PRODUKTFAKTA

**Material:** Bläck, pipetter och bägare i plast

Bläckpåsar i metalliserad polyester och polyetylen. Blått bläck.

**Tillverkningsland:** Tyskland

**Hållbarhetstid:** 4 år från tillverkningsdatum för set med pipett och 2 år för bläckpåsar.

**Förvaringsinstruktioner:** Förvaras på torr plats, ska skyddas från direkt solljus. Temp. 15-25°C  
Luftfuktighet 35-50% RH

#### Användningsområde:

Stericlin® svetskontroll är enkla att utföra och upptäcker snabbt kanaler och tomrum i svetsfogarna. I kombination med kontroll av svetsutrustning ger de en omfattande och säker rutinkontroll för värmeförslutningsprocessen av genomsiktliga steriliseringspåsar av papper/film.

För riktlinjer, se DGSV-riktlinjerna för validering av förpackningsprocesser enligt DIN EN ISO 11607-2. Användning av bläcktester krävs enligt bilaga A.7.3 och A.7.4 (sidan 23/24).

Svetsfogstestet finns i två versioner: "Pipett" och "engångspåse".

Art nr	Version	Innehåll	Inner fp st	Tfp fp st
<b>3FSZB830102</b>	Svetsfogskontroll-set med testvätska o pipett	1 flaska (75 ml), 1 bägare, 20 pipetter, dokumentationsblad, bruksanvisning.	1	1
<b>3FSZB830103</b>	Bläckpåsar engångs för svetsfogskontroll	bläckpåsar med tryckt bruksanvisning	30	30

#### Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH  
Industriestrasse 6  
D-91555 Feuchtwangen  
Germany  
www.stericlin.de

#### Distributor:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
www.astmedical.se